



Contour[®] plus ONE[»]

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

První měření glukózy
v krvi pomocí
inteligentního glukometru
CONTOUR®PLUS ONE



Contour
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Glukometr **CONTOUR®PLUS ONE**
poskytuje velmi přesné výsledky
měření glukózy v krvi.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Počáteční nastavení
glukometru
CONTOUR®PLUS ONE



Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

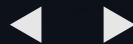

Počáteční nastavení


Před otestováním vyžaduje tento glukometr jednoduché počáteční nastavení.

Funkce se aktivují třemi jednoduchými kroky.

Stiskněte a podržte tlačítko **OK** asi po dobu 2 vteřin, dokud se glukometr nezapne.



Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

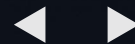

Počáteční nastavení

Před otestováním vyžaduje tento glukometr jednoduché počáteční nastavení.

Funkce se aktivují třemi jednoduchými kroky.

Stiskněte a podržte tlačítko **OK** asi po dobu 2 sekund, dokud se glukometr nezapne.



Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Počáteční nastavení

Před otestováním vyžaduje tento glukometr jednoduché počáteční nastavení.

Funkce se aktivují třemi jednoduchými kroky.

Stiskněte a podržte tlačítko **OK** asi po dobu 2 sekund, dokud se glukometr nezapne.



Contour[®]
plus **ONE**_»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


1.

Počáteční nastavení

Označte a potvrďte cílové rozsahy*.
Stiskněte tlačítko **OK**.

* Nastavený cílový rozsah můžete
po počátečním nastavení glukometru změnit
v aplikaci **CONTOUR™ DIABETES**.

UPOZORNĚNÍ – Před nastavením nebo
změnou cílových rozsahů v aplikaci
CONTOUR™ DIABETES se poraďte
se zdravotnickým odborníkem.

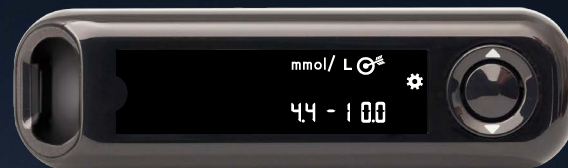

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


1.

Počáteční nastavení

Označte a potvrďte cílové rozsahy*.
Stiskněte tlačítko **OK**.

* Nastavený cílový rozsah můžete
po počátečním nastavení glukometru změnit
v aplikaci **CONTOUR™ DIABETES**.

UPOZORNĚNÍ – Před nastavením nebo
změnou cílových rozsahů v aplikaci
CONTOUR™ DIABETES se poraďte
se zdravotnickým odborníkem.

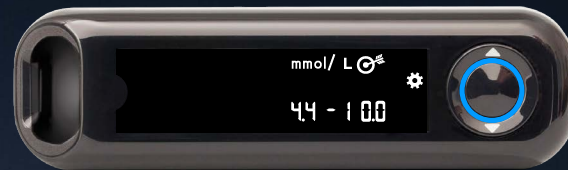

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte čas glukometru.

Pro změnu nastavení hodin stiskněte

▲ nebo ▼ na vnějším kroužku.

Pro potvrzení hodiny a přechod na minuty stiskněte tlačítko OK.

Pro změnu nastavení minut stiskněte

▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.



Contour[®]
plus **ONE**_»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte čas glukometru.

Pro změnu nastavení hodin stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku.

Pro potvrzení hodiny a přechod na minuty
stiskněte tlačítko OK.

Pro změnu nastavení minut stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte
tlačítkem OK.



Contour[®]
plus **ONE**[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte čas glukometru.

Pro změnu nastavení hodin stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku.

Pro potvrzení hodiny a přechod na minuty
stiskněte tlačítko OK.

Pro změnu nastavení minut stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte
tlačítkem OK.



Contour[®]
plus **ONE**_»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte čas glukometru.

Pro změnu nastavení hodin stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku.

Pro potvrzení hodiny a přechod na minuty
stiskněte tlačítko OK.

Pro změnu nastavení minut stiskněte
▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte
tlačítkem OK.



Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

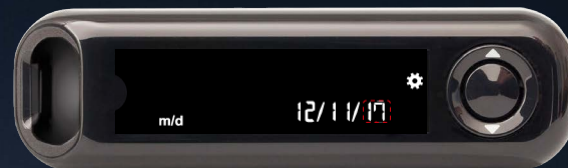

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

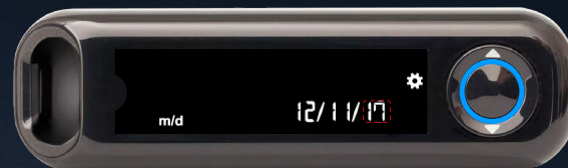

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

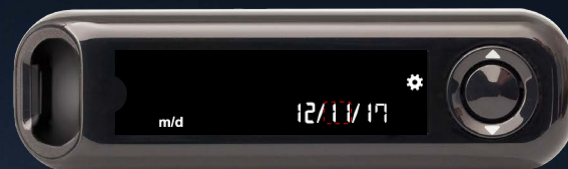

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

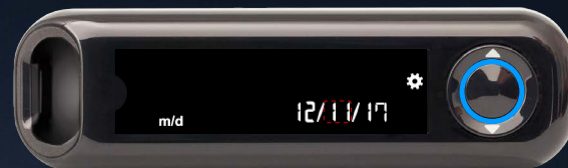

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

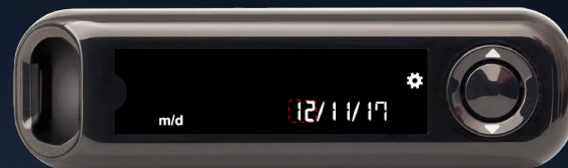

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.


Počáteční nastavení

Potvrďte nebo nastavte datum glukometru.

Pro změnu nastavení roku stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení měsíce stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro změnu nastavení dne stiskněte ▲ nebo ▼ na vnějším kroužku. Potvrďte tlačítkem OK.

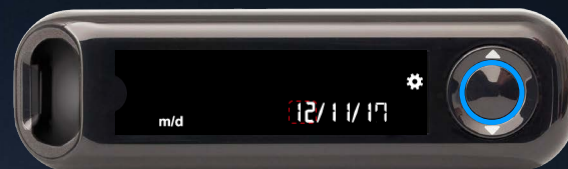


Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4.

Počáteční nastavení

Glukometr krátce zobrazí uložené nastavení, vydá zvukový signál a vypne se.

Nastavení je dokončeno a můžete začít přístroj používat.

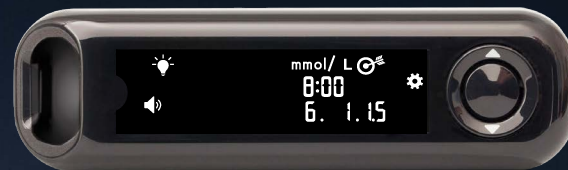

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Testování glukózy
v krvi pomocí glukometru
CONTOUR® PLUS ONE




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Vložení testovacího proužku

Uchopte testovací proužek tak, aby konec se šedým čtverečkem směřoval ke glukometru.

Vložte konec se šedým čtverečkem pevně do testovacího portu, dokud nezazní zvukový signál.

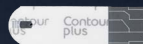

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Vložení testovacího proužku

Uchopte testovací proužek tak, aby konec se šedým čtverečkem směřoval ke glukometru.

Vložte konec se šedým čtverečkem pevně do testovacího portu, dokud nezazní zvukový signál.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Aplikování krve

Když je glukometr připraven k otestování kapky krve, ikona testovacího proužku bliká.

Koncem testovacího proužku se dotkněte kapky krve a podržte ho v ní, dokud nezazní zvukový signál.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.



Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.




**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.

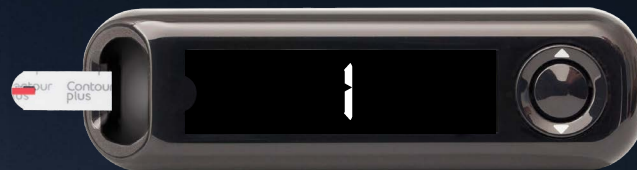

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Výsledek

Po odpočtu 5 vteřin glukometr zobrazí výsledek obsahu glukózy v krvi.

Je-li zapnutá funkce označení pokrmu, na výsledkové obrazovce bude blikat nalačno, před jídlem, po jídle nebo bez označení.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4.

Výsledek

Glukometr doporučí označení pokrmu podle denní doby: nalačno/snídaně, oběd, večeře nebo noc.

Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte správné označení a stiskněte OK.

Označení pokrmu u výsledku obsahu glukózy můžete nastavit na glukometru nebo v aplikaci **CONTOUR™ DIABETES**.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4.

Výsledek

Glukometr doporučí označení pokrmu podle denní doby: nalačno/snídaně, oběd, večeře nebo noc.

Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte správné označení a stiskněte OK.

Označení pokrmu u výsledku obsahu glukózy můžete nastavit na glukometru nebo v aplikaci **CONTOUR™ DIABETES**.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5.

Výsledek

Po dokončení testu na glukózu zobrazí glukometr výsledek, jednotky, čas, datum, označení pokrmu (je-li zadáno) a cílový indikátor.

SmartLIGHT™ svítí **zeleně** u požadované hodnoty, **červeně** u nízké hodnoty a **žlutě** u vysoké hodnoty.




Contour
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Výsledek

Aplikace **CONTOUR™ DIABETES** zobrazí poslední výsledek na mobilním zařízení spolu s pokyny, jak si dále počínat.

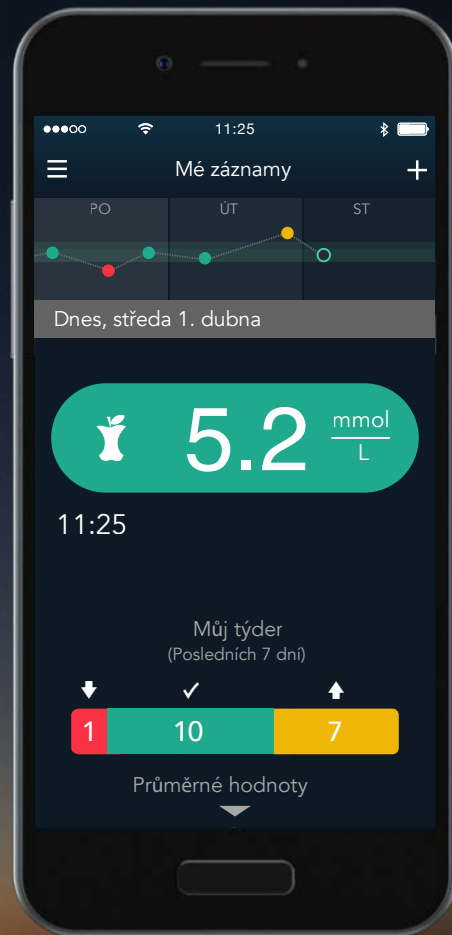

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotazy ohledně glukometru **CONTOUR® PLUS ONE** a aplikace **CONTOUR™ DIABETES**, promluvte si se zdravotnickým odborníkem a odkažte se na uživatelskou příručku. Pro více informací a zjištění, zda je glukometr **CONTOUR® PLUS ONE** k dostání ve vaší zemi, navštivte diabetes.ascensia.com.



Jakoukoli změnu své léčby, stravy nebo sportovního zapojení vždy předem konzultujte se svým poskytovatelem lékařské péče.

Získání aplikace



Apple a logo Apple společnosti Apple Inc. jsou obchodní známky registrované v USA a ostatních zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Slovní známka a logo Bluetooth jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto známek v tomto dokumentu podléhá oprávnění. Google Play a logo Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.

Datum přípravy: únor 2018 code: G.DC.12.2017.52592

© Copyright 2017. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.



**Contour
plus ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com



Contour[®]
diabetes solutions